


AIR N GO
EASY




**Aeropulidor
todo en uno
para
procedimientos
sencillos**

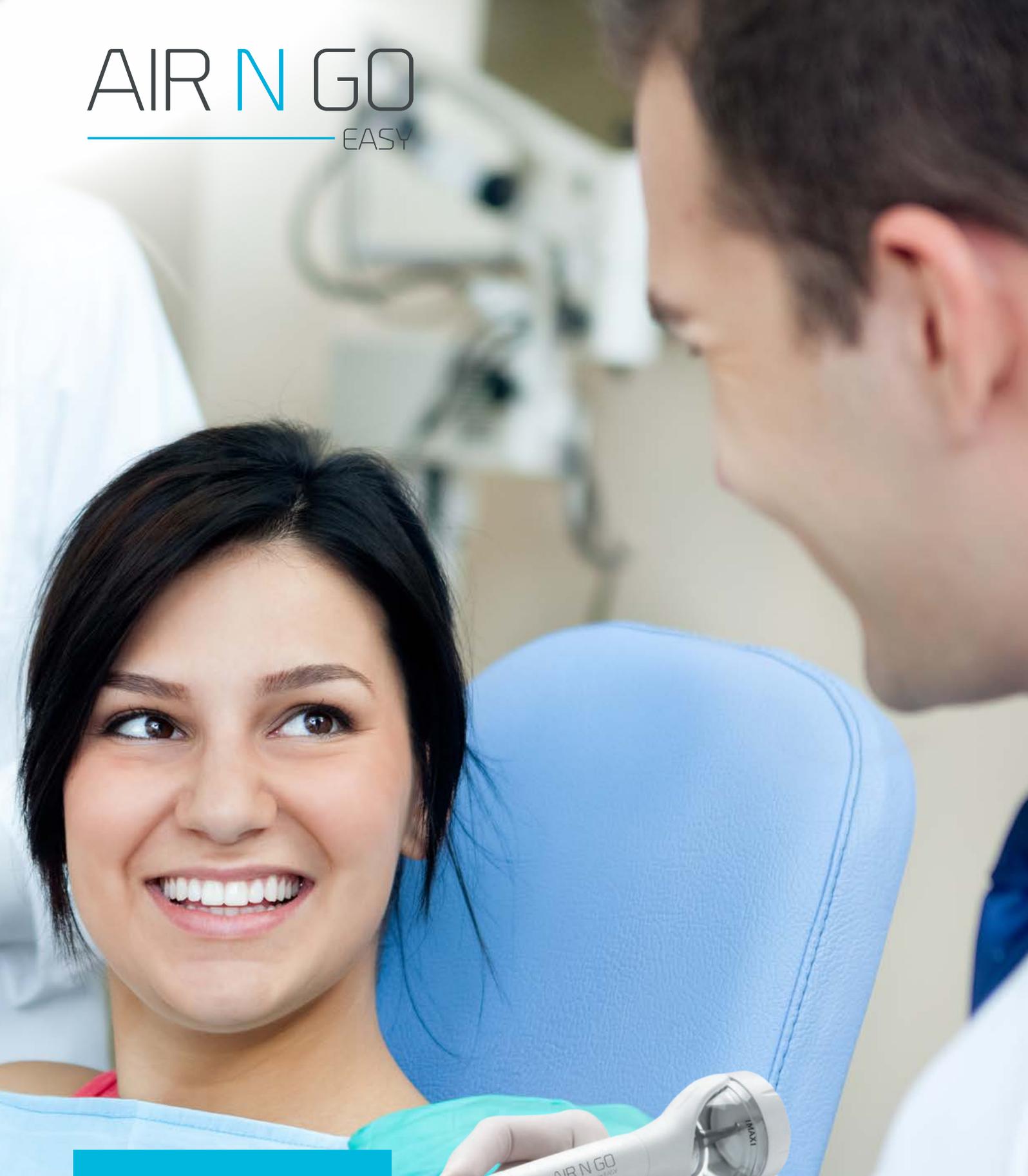

Sencillez y eficacia, todo en uno

Para un tratamiento supra y subgingival

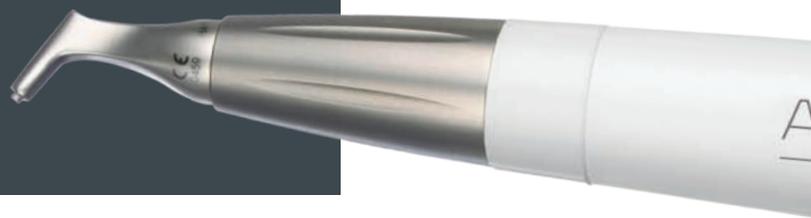

Una solución completa

- 4 boquillas para un control proactivo del progreso del tratamiento periodontal.



- Dependiendo de sus necesidades clínicas, elija:
 - Polvo **CLASSIC** a base de bicarbonato de sodio.
 - Polvo **PERIO** a base de glicina.





Una sola
pieza de
mano

Función
dual

- **Función SUPRA** : pulido profiláctico a diario en zonas supragingivales.
- **Función PERIO** : pulido subgingival para procesos de mantenimiento, tratamientos periodóncicos y periimplantitis.

Este producto sanitario alía simplicidad con rendimiento.

Una sola pieza de mano para cubrir un completo rango de cuidados y tratamientos.

AIR-N-GO® easy combina funciones esenciales con fiabilidad para facilitar su trabajo diario:

- Puesta en marcha rápida: raccord de conexión directo.
- Gran libertad de movimiento: rotación de 360°, tratamiento rápido y preciso de las áreas que requieren atención.
- Limpieza sencilla de la pieza de mano: las partes principales pueden desmontarse para una mejor higiene.



Fácil mantenimiento.

4 aliados para prevenir y combatir la enfermedad periodontal



Boquilla Air-N-Go® SUPRA

- Herramienta adecuada para cualquier tratamiento profiláctico supragingival en combinación con la gama de polvos AIR-N-GO® **CLASSIC**
- Garantiza un procedimiento rápido y eficaz para una mayor comodidad de trabajo.



Caso clínico Dr. P. ROUAS (Francia).



Boquilla Air-N-Go® PERIO MAINTENANCE

- Consumo reducido de partículas finas del polvo AIR-N-GO® **PERIO** durante la fase de mantenimiento.
- Tratamiento de mucositis y retorno a una situación clínica saludable.
- Acción contra el progreso de la enfermedad periodontal.



Caso clínico Dr. C. LIM (U.K.).



Boquilla Air-N-Go® PERIO EASY

- Diseño innovador en forma de “calzador” que proporciona una fácil inserción subgingival.
- De gran ayuda para el tratamiento subgingival no quirúrgico en dientes e implantes (bolsas periodontales de 3 a 8 mm).
- 5 segundos por cara es todo lo que necesita.



Caso clínico Dr. C. LIM (U.K.).

Las boquillas AIR-N-GO®, que resultan de los más avanzados estudios de dinámica de fluidos, proporcionan un spray continuo, preciso y controlado en cualquier contexto clínico.

En su práctica diaria, estas boquillas proporcionan potencia y eficiencia para la eliminación del biofilm supra y subgingival.



Boquilla Air-N-Go® PERIO

- Uso subgingival para tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos (túneles y colgajos abiertos).
- Potente spray lateral doble.
- Descontaminación de bolsas periodontales profundas (de 8 a 10 mm).



Caso clínico Dr. A. PATEL (U.K.).

Soluciones personalizadas para sus necesidades clínicas

Los polvos AIR-N-GO® han sido especialmente diseñados y estudiados para producir un tratamiento efectivo y suave en todas las superficies tratadas. Estos polvos son compatibles con el AIR-N-GO® easy y no requiere ningún cambio de pieza de mano.



5 sabores frescos basados en aromas 100% naturales o aceites esenciales:
 Frascos (4 x 250g): F10254 Neutro, F10253 Cola, F10252 Frambuesa, F10250 Menta y F10251 Limón
 Sobres (50 x 20g): F10260 Neutro, F10259 Cola, F10258 Frambuesa, F10256 Menta F10257 Limón

Polvos Air-N-Go® CLASSIC

A base de bicarbonato de sodio.
 (≈ 76 μm)




F10125
 Suministrada de serie

- Completa gama de **polvos supragingivales**: deje que su paciente elija el sabor que más le apetece.
- Limpieza escrupulosa con resultados instantáneos.
- Eliminación de manchas y placa bacteriana, incluso en áreas de difícil acceso.
- Mejor aceptación del tratamiento: menos sangrado y menos dolor para su paciente.

Utilizado con AIR-N-GO® EASY SUPRA 120°, las indicaciones son:

- Acabado después del detartraje.
- Preparación para el blanqueamiento.
- Limpieza de áreas interproximales y fisuras.
- Preparación de la superficie del diente antes del grabado.
- Limpieza de brackets de ortodoncia.
- Eliminación del biofilm supragingival, placa, manchas y residuos temporales de cemento.

COMPETENCIA

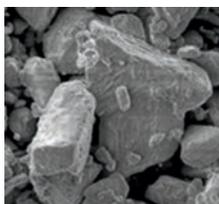


Partículas estratificadas con geometría agresiva (x1000).




El esmalte tratado muestra numerosos rasguños (x300).

AIR N GO

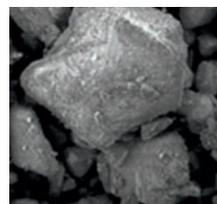

Partículas con geometría suavizada (x1000).

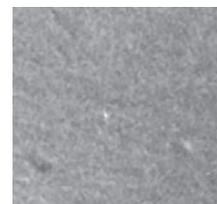

Esmalte tratado: superficie preservada sin impactos ni rasguños (x300).

Polvo Air-N-Go® PERIO

Basado en glicina natural.
(≈ 25 µm)

- Uso exclusivo para **tratamientos subgingivales** como complemento de la terapia inicial.
- Bajo poder de abrasión para preservar las superficies tratadas (dientes e implantes) y las zonas anatómicas más frágiles.
- Previene la progresión del biofilm subgingival.
- **Propiedades únicas con múltiples ventajas:**
 - Eliminación de placa durante el mantenimiento periodontal en superficies radiculares expuestas, sin erosionarlas.
 - Reducción de la carga bacteriana en las bolsas periodontales.



F10270 (3 x 160 g)



F10126
Suministrada como opción

Utilizado con AIR-N-GO® PERIO EASY, las indicaciones son:

- Eliminación del biofilm subgingival.
- Tratamiento de la enfermedad periodontal y periimplantitis (bolsas de 3 mm - 8 mm).



F10127
Suministrada como opción

Utilizado con AIR-N-GO® PERIO, la indicación es:

- Tratamiento de la enfermedad periodontal y periimplantitis (bolsas de 8 mm - 10 mm).



F10127
Suministrada como opción

Utilizado con AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE, la indicación es:

- Mantenimiento periodontal (bolsas hasta 4 mm).



AIR-N-GO "PERIO" (x1000)

Source: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research)
S.E.M. photos



ACTEON

en su práctica diaria



Profilaxis

Diagnóstico

Revele las enfermedades vinculadas al cuidado bucal gracias a Soprocare®.

Tratamiento

Newtron® / Air-N-Go® y Bliss en sinergia para combinar eficacia y comodidad para un tratamiento preciso y eficiente.

Seguimiento

Tenga un control confiable e inmediato del estado clínico.



AIR N GO
EASY



SOPROCARE



NEWTRON



Bliss
by Acteon

Para obtener más información sobre buenas prácticas y el uso del AIR-N-GO® easy, vea nuestro canal **YouTube**



Air-N-Go® Easy: Aeropulidor - Newtron® P5 XS B.Led: Equipo de ultrasonidos
Productos sanitarios de Clase IIa - CE0459 (GMED) - Fabricante: SATELEC® - Francia.
Soprocare®: Producto sanitario de clase I - CE - Fabricante: SOPRO® - Francia.
Bliss: Producto sanitario de clase I - CE - Fabricante: PRODONT HOLLIGER - Francia.
Lea atentamente las instrucciones de uso, disponibles en www.acteongroup.com/es
Solo para uso profesional dental.

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers | Avda. Principal Nº 11H | 08181 SENTMENAT | BARCELONA
Tel + 34 900 104 423 | E-mail: info.es@acteongroup.com | www.acteongroup.com/es

