

A-dec 4000

a dec®



# La diferencia de A-dec

Disfrute de la tranquilidad de saber que los productos A-dec siempre funcionan y concéntrese en lo más importante: *el paciente*.

Elimine los tiempos de inactividad. Conserve los costos de propiedad bajos. Espere un rendimiento duradero.

Ningún otro fabricante de equipos dentales dedica tanto tiempo a la investigación y el cuidado en el diseño, la construcción y los productos de soporte. Este es uno de los motivos por el que los dentistas, las escuelas de odontología y los consultorios en todo el mundo eligen A-dec.



Respaldado por una garantía de 5 años.







# Accesible. Sólido. Estilo.


A-dec 400 combina la forma y la función para obtener menor complejidad y más estilo a un precio magnífico. No se necesita sacrificar el acceso ergonómico a la cavidad bucal para mejorar la comodidad del paciente; se puede contar con ambos.

Si a esto se suma la construcción sólida, el estilo contemporáneo y la versatilidad izquierda y derecha, se adquiere un sistema que es el mejor valor a largo plazo disponible en el mercado.

A-dec 400, un enfoque cuidadoso en el diseño de los sistemas dentales.

## **Experimente la confiabilidad legendaria.**

Ingeniería inteligente. Funcionalidad de reducción de fatiga. Confianza comprobada. A-dec comienza con una filosofía de diseño pensada para innovar, no para introducir complicaciones. Con A-dec 400, invierte en simplicidad. Día tras día. Año tras año.

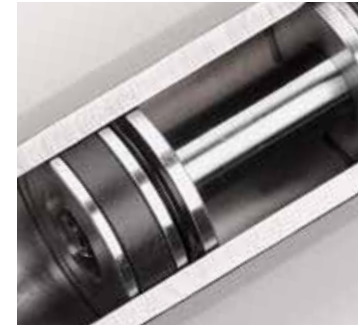



# Comodidad pura

La comodidad del paciente es primordial para reducir la ansiedad. El diseño del sillón A-dec 400 ayuda al paciente a sentirse cómodo.

**Pivote virtual.** Sincroniza el movimiento del sillón con la anatomía y el movimiento del paciente.

**Apoyacabezas de doble articulación.** Se ajusta fácilmente para el posicionamiento óptimo del paciente.

**Apoyabrazos de dos posiciones.** Combina un soporte cómodo para el brazo y el codo con un diseño sólido para el soporte del peso a fin de facilitar la entrada y la salida del paciente.

**Diseño inclinado del tablero de pie.** Proporciona al paciente un soporte cómodo para la parte inferior de las piernas.

**Tapizado sofisticado.** Incluye estilos de tapizados sin costuras sencillos y elegantes, disponibles en un amplio rango de colores de diseñador.















# Garantiza una carrera saludable

La clave para la productividad y una carrera duradera es estar cómodo en el trabajo. Es por ello que A-dec 400 está diseñado para ofrecerle un movimiento fluido y alineado ergonómicamente.

**Respaldo ultradelgado y flexible.** El delgado perfil de la silla optimiza su acceso al paciente, ya que le permite colocar las rodillas por debajo del sillón, mientras el paciente reposa cómodamente utilizando el apoyacabezas de doble articulación. Diseñado a partir de años de experiencia, esta combinación fomenta una mejor posición para usted, a la vez que mejora el acceso a la cavidad bucal.

**Punto de base bajo.** Permite al profesional dentista, sin importar su estatura, trabajar con comodidad.

**Opciones ergonómicas del sistema dispensador.** Coloca las piezas de mano y los elementos auxiliares a su alcance, al tiempo que elimina el movimiento innecesario para mantenerlo concentrado.







# A-dec 400: versatilidad y confiabilidad legendaria

Como toda la línea de productos, A-dec 400 está diseñado para facilitar el acceso del equipo dental, brindar comodidad superlativa al paciente, y años de confiabilidad sin inconvenientes.

**Versatilidad izquierda y derecha para una mayor productividad.** Configuración verdaderamente ambidiestra a fin de admitir las diferentes preferencias de los profesionales dentistas. El estilo Radius de los módulos de soporte y del sistema permiten la rotación fácil y rápida en torno del sillón, de manera que ofrece una compatibilidad completa a ambos lados.

**Control de infecciones desde adentro.** En el centro del sistema dispensador se encuentra un bloque de control, diseñado en función de la salud de los pacientes para brindar un rendimiento sin problemas. Se elimina el agua estancada e inactiva. El agua circula cada vez que se activa una pieza de mano.

**Sistema de mantenimiento autónomo de conducto de agua.** Para proteger contra mal olor, mal gusto y deterioro, los conductos de A-dec se fabrican con AlphaSan® antimicrobiano. El conducto colector interno de la botella de 2 litros y el conector de rápida desconexión permiten la extracción y el reemplazo sencillos, al mismo tiempo que se reduce el riesgo de contaminación cruzada.

## **Totalmente ambidiestro.**

La configuración justa para su forma de trabajo. Los sistemas dispensadores pueden montarse desde la parte frontal del sillón, desde el gabinete lateral o trasero, o desde la pared. También el instrumental del asistente es convertible para mano izquierda/derecha, y está disponible en brazo corto o brazo largo.







# Se integra sin inconvenientes

El sillón dental A-dec 400 y el sistema dispensador A-dec 300 ofrecen la combinación perfecta de maniobrabilidad compacta y estilo genuino. El sistema dispensador A-dec 300 está diseñado para ser pequeño por fuera y grande por dentro.

**Control simple e inteligente.** El panel táctil de lujo A-dec 300 y el control de pie se combinan para brindar un control aerodinámico de las funciones de las piezas de mano, los accesorios integrados, el sillón odontológico y la lámpara dental. Preconfigure la cámara intrabucal, el instrumento ultrasónico, la lámpara de fotocurado y hasta dos motores eléctricos.

**Actualizable en el futuro.** La plataforma del sistema dispensador le permite integrar las últimas innovaciones de productos clínicos, y adecuarse a las tecnologías del futuro.

**Botón de freno para el brazo flexible (modelos especificados).** Bloqueo en la posición del sistema dispensador a la altura deseada para optimizar la comodidad y la ergonomía.

## El calce perfecto.

Cuente con todas las piezas de mano y todos los elementos auxiliares justo donde los necesita. El sistema dispensador está disponible para los estilos Continental y Tradicional.



# Opciones de A-dec 400

## **Sistemas dispensadores**

Cuatro opciones de sistemas dispensadores ergonómicos para las piezas de mano y los accesorios: A-dec 300 montado en el sillón Tradicional y Continental; A-dec 500 dúo en posición de las 12 en punto montado en el mueble y sistema dispensador lateral.

## **Lámpara dental**

Ya sea que su elección sea A-dec 300 o 500 LED, obtenga una intensidad balanceada y un patrón de iluminación uniforme sin sombras indeseadas. La lámpara A-dec se enciende automáticamente cuando se reclina el respaldo y se apaga cuando el sillón se mueve a la posición de entrada y salida.

## **Instrumentación del asistente montada en el sillón dental**

Disponible en estilo de brazo corto o brazo largo, con panel táctil integrado. Soporte disponible simple de 3 o 4 posiciones o doble de 2 posiciones.

## **Montaje del monitor**

El brazo de doble pivote incluye HDMI predireccionado y cables de alimentación. El montaje del monitor con soporte lateral tiene un radio de giro de 430° y una capacidad de pivote de hasta 85°, lo que permite acomodar el campo de visión desde la posición sentada o dorsal.

## **Escupidera**

Fabricada con porcelana vítrea resistente a las manchas. Gira  $\pm 90^\circ$  para ofrecer un mejor acceso al paciente. Las funciones de llenado del vaso y tazón de enjuague se programan en el panel táctil.



## Tapizado sin costuras



El color hace la diferencia a la hora de crear un ambiente que refleje su personalidad. Es por eso que A-dec ofrece una gran variedad de colores y opciones para seleccionar y coordinar tapizados sin costura y cosidos.



**Pida sus muestras en  
a-dec.com/InspireMe**

## Tapizado cosido



\* Colores cosidos que combinan con los colores sin costura.

Los colores reales pueden variar. Consulte al distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de colores y la información del producto más actualizada.



# Especificaciones

## Sillón dental A-dec 411

Rango de altura de elevación	De 13,75" a 31,5" (de 349 mm a 800 mm); punto inferior de 14,75" (375 mm) con montaje doble
Longitud total de la extensión máxima	72" (1829 mm)
Respaldo delgado y flexible	1" (25 mm)
Pivote del sillón	60° (30° a cada lado desde el centro)
Conversión izquierda/derecha	Sí
Apoyacabezas deslizante de doble articulación	Sí
Suministro eléctrico de 300 vatios integrado	Sí
Control de pie o manual	Ambos
Sistema de accionamiento	Accionamiento híbrido (inclinación electromecánica, base hidráulica)
Opciones de tapizado	Con costuras o liso
Opciones de montaje del monitor	Brazo liviano del monitor

## Sistemas dispensadores

	Sistema de 12 en punto A-dec 500	Sistema lateral A-dec 500	Sistema A-dec 300
Bloque de control	4 posiciones	4 posiciones	3 posiciones estándar (4 posiciones opcionales)
Conversión para mano izquierda/derecha	Sí	No	Sí
Posiciones del soporte de la pieza de mano	4	4	4
Mango(s) del freno	N/D	1	1 estándar (2 opcionales)
Panel táctil de lujo disponible	Sí	Sí	Sí
Fuente de iluminación intrabucal de cuádruple voltaje	Estándar	Estándar	Opcional
Control de pie	Mojado/seco con soplador o palanca	Mojado/seco con soplador o palanca	Mojado/seco, mojado/seco con soplador o palanca
Brazo flexible balanceado con freno de aire	N/D	Sí	Sí, menos A-dec 336
Modelos	Sistema de 12 en punto dúo A-dec 541	Sistema lateral A-dec 542	Brazo flexible balanceado con freno de aire A-dec 333 de montaje estilo Continental Radius A-dec 335 de montaje estilo Continental Support A-dec 332 de montaje estilo Traditional Radius A-dec 334 de montaje estilo Traditional Support Ajuste de altura manual A-dec 336 de montaje estilo Traditional Radius





# El socio para alcanzar el éxito



En A-dec, encontrará un socio que lo acompañará a lo largo de toda su carrera profesional. Desde nuestras oficinas centrales en Newberg, Oregon, brindamos soporte a oficinas globales y contamos con una red de distribuidores especializados en más de 100 países de todo el mundo.

**Descubra la diferencia de A-dec.** Visite [a-dec.com/TheDifference](http://a-dec.com/TheDifference) para descubrir cómo cada detalle de las soluciones de A-dec garantiza una inversión confiable y duradera.



#### Oficina central de A-dec

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 EE. UU.  
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá  
Tel: +1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá  
Fax: +1.503.538.0276  
[a-dec.com](http://a-dec.com)

#### A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 desde Australia  
Tel: +61.(0)2.8332.4000 desde fuera de Australia

#### A-dec China

Tel: 400.600.5434 desde China  
Tel: +86.571.89026088 desde fuera de China

#### A-dec Reino Unido

Tel: 0800.233285 desde el Reino Unido  
Tel: +44.(0).24.7635.0901 desde fuera del Reino Unido



A-dec, el logotipo de A-dec, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC y Radius son marcas comerciales de A-dec Inc. y están registradas en EE. UU. y en otros países. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200, A-dec Inspire y reliablecreativesolutions también son marcas comerciales de A-dec Inc. Ninguna de las marcas comerciales o los nombres comerciales que aparecen en este documento pueden reproducirse, copiarse o manipularse en forma alguna sin el consentimiento expreso y por escrito del propietario de la marca.

Algunos símbolos de los paneles táctiles son propiedad de A-dec Inc. Se prohíbe estrictamente cualquier uso de estos símbolos, en su totalidad o en parte, sin el previo consentimiento por escrito de A-dec Inc.

Los colores y productos mostrados pueden diferir de los materiales reales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de colores exactos y la información más reciente sobre los productos.