

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Experimente la máxima levedad



KaVo. Dental Excellence.

Sus deseos, nuestra inspiración.

Al principio fue una idea. Una visión.

Desarrollar un nuevo concepto de tratamiento que le apoye en todos sus pasos de trabajo y que se adapte a sus necesidades.

Primero escuchamos detenidamente sus opiniones. Con muchas de sus ideas ideas en la cabeza nos dispusimos a realizar lo que nos habían solicitado: un manejo más sencillo, unos procesos de trabajo ágiles y fluidos, una comunicación moderna con el paciente, acceso a los datos del paciente, procesos automatizados de higiene.

Nos solicitaron mantener las características de probada eficacia - como p.ej. el concepto ergonómico y único de sillón suspendido.

Al fin se convirtió en su Vision. Y además en nuestro mejor concepto de tratamiento. Un concepto que cumple con lo que todos han deseado - facilitar el trabajo diario.

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision - Viva su Vision.

Confort según los requerimientos individuales: el elemento de odontólogo del KaVo ESTETICA E70 y E80 Vision nuevamente está a disposición como versión de mesa, de colibrí o de carro.

* Disponible para KaVo ESTETICA E70



Un resumen de todas las novedades:

El nuevo elemento de odontólogo. Sencillo e intuitivo.

- 1 Concepto de manejo completamente nuevo para un acceso rápido y directo a todas las funciones importantes que ahorran tiempo y esfuerzo durante el tratamiento

Comunicación con los pacientes. Listo para comenzar.

- 2 ERGOcam One de KaVo, la cámara intraoral de uso sencillo
- 3 Nuevas pantallas de alta resolución: KaVo Screen HD de 22 pulgadas y KaVo Screen One de 19 pulgadas

CONEXIO.

Encuentre todo fácilmente.

- 4 Software de sistema CONEXIO, un interfaz inteligente de datos en su consulta, le apoya con funciones útiles y le ofrece un acceso continuo a los datos del paciente

Higiene.

Automatizado. Integrado.

- 5 Centro de higiene con adaptadores integrados extraíble para las mangueras de succión y de los instrumentos para una limpieza y desinfección automatizada y que ahorran tiempo

Nuevo diseño.

Visiblemente moderno. Notablemente agradable.

- 6 Edición Blue Line en azul océano o azul humo
- 7 El cuerpo del equipo diseñado en color blanco dental

Sillón en suspensión.

De eficacia probada.

- 8 Nuevos apoyabrazos regulables
- 9 Apto para un peso del paciente hasta 180 kg

Cirugía.

Sin límites. Integrado.

- 10 Nueva función de cirugía con motor quirúrgico pequeño y confortablemente ligero así como con bomba con solución salina integrada*

* Imagen véase página 12

Confíe simplemente en su intuición.

Un manejo muy sencillo.

Con la nueva pantalla táctil sensitiva controlará su KaVo ESTETICA E70/E80 Vision de forma aun más intuitiva

Tenga un fácil acceso a todas las funciones e informaciones importantes con la pantalla táctil. Antes, durante y después del tratamiento.

El diseño completamente nuevo de la superficie de control fue desarrollada especialmente para los procesos de trabajo en el sector dental. Tiene un diseño claro, una estructura lógica y garantiza en cualquier momento un trabajo fácil y sencillo.

El hecho de que el concepto de manejo haya sido galardonado con el premio "Red Dot: Communication Design" prueba que el interfaz de usuario refleja las tendencias más actuales y de que tanto el diseño como su manejo han sido calificados como "excelentes" por el jurado.




reddot award 2015
winner interface design

El enfoque está su forma personal de trabajar.

Su unidad de tratamiento debe trabajar de forma tan individual como lo hace usted. Equipe por lo tanto su unidad KaVo ESTETICA E70/E80 Vision según sus requerimientos personales. Debido a la instrumentalización flexible, las especializaciones no representan problema alguno. Equipe el elemento de odontólogo y el elemento del asistente según Usted y su equipo lo necesiten.

Muchas funciones se dejan ajustar individualmente según el odontólogo, como p.ej. el nombre del odontólogo, los tipos de tratamiento o la asignación de teclas directas en la pantalla inicial.

¿Otros equipamientos y ampliaciones adicionales? Gracias a interfaces adecuadas para el futuro esto siempre será posible.

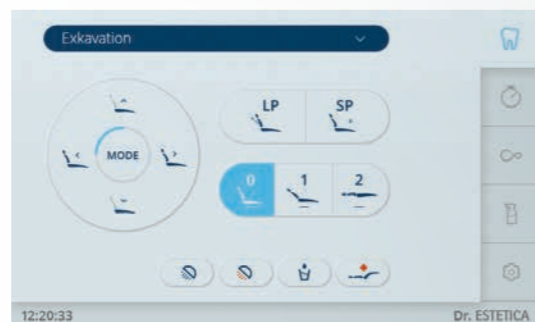

*Bien estructurado. Sencillo. Claro.
La nueva superficie de mando del elemento de odontólogo.*

Superficies de cristal de alta calidad en el elemento de odontólogo así como en el elemento del auxiliar garantizan una limpieza rápida y una mayor higiene.

Algo especial, no sólo para especialistas.

Más libertad. Más comodidad.

Acceda a todas las funciones y parámetros de aparatos especiales integrados que necesite durante el tratamiento usando la pantalla táctil o el reóstato de pie. En el elemento del odontólogo tendrá siempre todas las informaciones a mano. Es posible programar en cualquier momento diferentes pasos de tratamientos individuales.



También el sistema colibrí del elemento de odontólogo cuenta con el nuevo concepto de manejo.

Endodoncia.

Ahorre en la compra de un aparato caro de endodoncia y aproveche las funciones endo integradas. Con tres diferentes modos para el control de las limas Usted estará excelentemente equipado para todas las aplicaciones de endodoncia.

Los parámetros más importantes como la multiplicación y los valores de torque pueden ser ajustados, revisados y almacenarse directamente mediante el elemento de odontólogo.

La inteligente opción quirúrgica.

Transforme su trabajo en lo más confortable posible. Equipe su KaVo ESTETICA E80 Vision adicionalmente con el nuevo KaVo INTRA LUX S600 LED. Junto con los instrumentos de cirugía KaVo y la bomba de solución salina integrada en el elemento de odontólogo, Usted podrá tener a su disposición un número ilimitado de funciones de un equipo quirúrgico moderno, directamente en su unidad de tratamiento.



Gracias a las funciones endo y quirúrgicas integradas y libremente programables, su flujo de trabajo será perfecto y no necesitará adquirir aparatos externos.

Todo dispuesto para mantener una postura corporal sana.

Póngase cómodo.

Disfrute del concepto ergonómico completo del sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision en el que se estará cómodo, sentado, de pie y tumbado.

Prácticamente no existen mejores condiciones para mantener una posición corporal sana para Usted y para su asistente. Disfrute de la libertad de secuencias naturales o intuitivas. Y permita también a sus pacientes que disfruten tumbados. Acolchados confortables así como ajustes de longitud del respaldo confort garantizan que su sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision pueda adaptarse a cualquier tamaño del cuerpo.

Ofrezca una mayor libertad a sus piernas.

Convéncese del amplio espacio libre debajo del sillón del paciente y posicione el reóstato de pie en el lugar que Usted desee. El concepto único del sillón en suspensión de KaVo ESTETICA E70/E80 Vision le da todas las libertades para realizar su trabajo de una manera sana y relajada. Eso significa: una posición saludable del cuerpo, suficiente cercanía al paciente y suficiente libertad de movimiento en cada situación de tratamiento.



¡Mantenga la postura!

Realice el tratamiento con una posición corporal sana y libre de carga, siguiendo unos movimientos naturales. Podrá ajustar su unidad KaVo ESTETICA E70/E80 Vision según sus necesidades y costumbres personales y cualquier tamaño corporal. La altura ajustable del sillón del paciente se encuentra entre 350 mm y 900 mm y le asegura unas condiciones ergonómicamente óptimas, no importa si está realizando el tratamiento sentado o de pie.



Trate a sus pacientes en la mejor posición.

La ubicación del paciente según Trendelenburg es confortable y ergonómica en cada posición de tratamiento. Porque el reposapiés se inclina y se levanta automáticamente según la inclinación del respaldo. Este movimiento combinado impide que la espalda del paciente se comprima o extienda demasiado durante el ajuste del respaldo. La posición elevada de los pies favorece adicionalmente la circulación.

Disfrute de un equipo galardonado.

Las unidades de tratamiento KaVo ESTETICA E70/E80 Vision, así como el taburete PHYSIO Evo han sido premiados, al igual que sus antecesores, con el sello de calidad ergonómica de la asociación alemana "Espalda Sana" (Aktion Gesunder Rücken). Una comisión de Expertos multidisciplinar e independiente la ha calificado como un lugar de trabajo ergonómicamente óptimo a partir de unos criterios estrictos de control y asignaron este premio por primera vez a una unidad de tratamiento dental.



PHYSIO Evo y Evo F ofrecen una perfecta ergonomía con el máximo confort de asiento para un trabajo saludable y relajado.



Comodidad en cada detalle.


Un trabajo hecho a medida.

Ofrezca a sus pacientes una comodidad hecha a medida y disfrute de unos procesos de trabajo perfectos en cada situación. La unidad KaVo ESTETICA E70/E80 Vision le garantiza su funcionalidad aunque se trate de pacientes con un peso muy alto. Aunque el peso sea de hasta 180 kg, sus pacientes no tendrán que renunciar a la comodidad. Y Usted tampoco.

Relajación gracias a movimientos fluidos.

Con la función Slow Motion se puede desplazar el sillón del paciente durante el tratamiento con el microscopio a una velocidad reducida, como en cámara lenta. Esto es especialmente ventajoso en el tratamiento de pacientes de mayor edad.

Posición máxima de 900 mm y posición mínima de 350 mm. Ideal para todas las necesidades, incl. trabajar de pie.

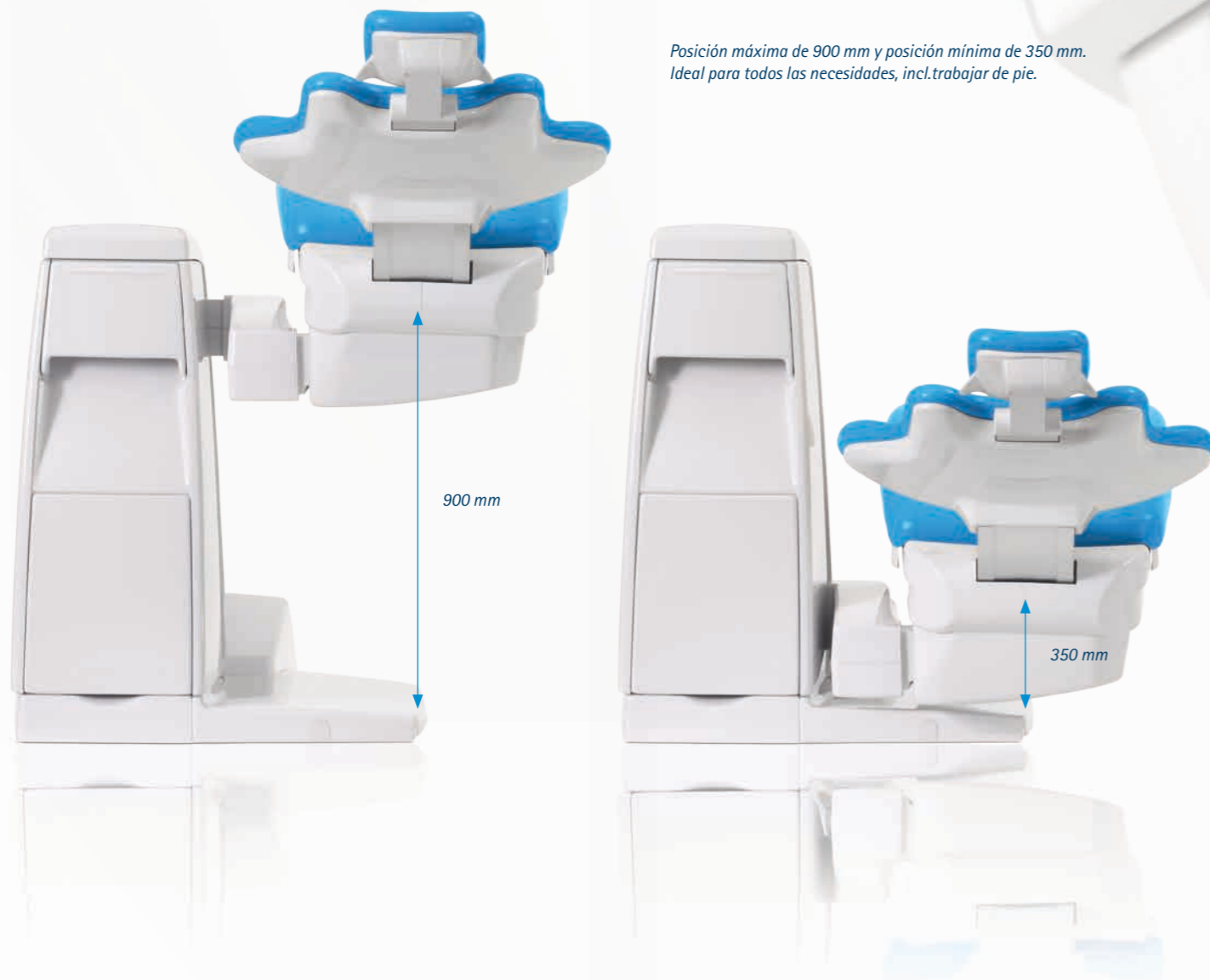

Fácil acceso.

Facilite a sus pacientes el sentarse y levantarse con ayuda de los nuevos reposabrazos de la unidad KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Pueden girar fácilmente hacia abajo y ofrecen un excelente apoyo y una alta seguridad durante el tratamiento. Sin que Usted tenga que renunciar a la máxima libertad de movimiento.



Los nuevos reposabrazos no sólo cuentan con un diseño moderno sino que además ofrecen un mayor soporte y una mayor seguridad para Usted y para sus pacientes.

Un reóstato de pie para todo.

¿Tiene las manos ocupadas durante el tratamiento de sus pacientes? Entonces controle su KaVo ESTETICA E70/E80 Vision simplemente con el pie. Con la lógica de manejo del reóstato de pie es posible controlar todas las funciones y todos los aparatos integrados. Con ello Usted minimizará adicionalmente el riesgo de contaminaciones cruzadas y trabajará bajo condiciones especialmente higiénicas.

Y además ayudará a relajar los músculos de las piernas. Porque al controlar el reóstato de pie con suaves movimientos hacia la derecha y la izquierda, su musculatura permanecerá relajada incluso en tratamientos de larga duración. Por lo tanto puede trabajar de manera relajada y con alta precisión. Opcionalmente está disponible un reóstato de pie inalámbrico para una mayor flexibilidad.



Trayectos cortos para unos procesos de trabajo perfectos.

La combinación perfecta.

Confíe en un equipo de genios que en grupo son simplemente imbatibles. ¿Por qué? Debido a que todos los instrumentos y funciones están interrelacionados perfectamente en el sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Integre incluso motores endo y quirúrgicos sin problemas. Controle su elemento de odontólogo directamente mediante la pantalla táctil - o mediante el reóstato de pie. Amplíe su unidad de tratamiento a través de un interfaz con conexión USB, de forma sencilla, mediante el software de sistema CONEXIO.


Con el elemento de odontólogo y del auxiliar disfrutará de la máxima flexibilidad y de un rendimiento perfecto. También el confort puede ser innovador, rápido, preciso y eficiente. Ergonomía de primera. Con otras palabras: Para Usted y su asistente sólo habrá ventajas.

Todo está en su sitio.


Disfrute de una perfecta secuencia de trabajo. Punto central de ello es el sistema de soporte KaVo Centro, en el cual se encuentran organizados todos los aparatos importantes de manera útil y ergonómica - el centro que marca sus procesos de tratamiento, trayectos y secuencias de movimiento. Completamente automático. Debido al principio de trayectos cortos tendrá todo siempre a mano.

Por cierto: Durante el reequipamiento y la ampliación con aparatos adicionales y futuras tecnologías Usted sigue siendo absolutamente flexible. Debido a los múltiples adaptadores, es posible intercambiar los aparatos y componentes de una manera sencilla y rápida.

Posibilidad de equiparlo de forma individualizada: el sistema de soporte Centro.

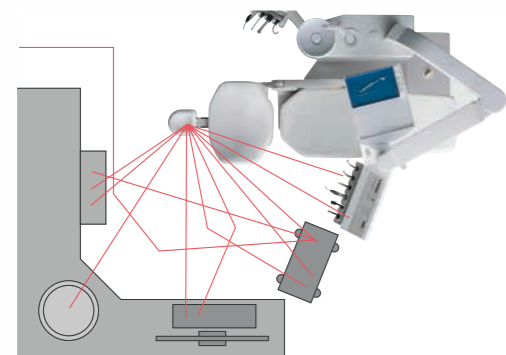

Procesos con una unidad de tratamiento convencional.

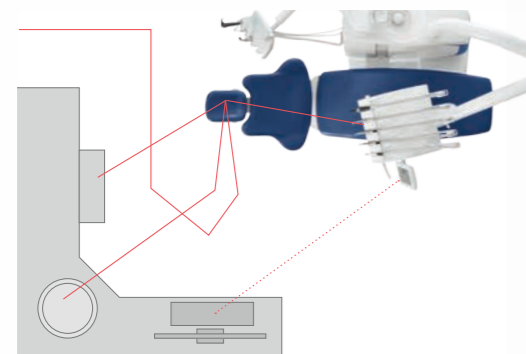

Trayectos con el nuevo KaVo ESTETICA E70 Vision.

El futuro será sencillo - también para su auxiliar.

El descubrimiento de la levedad.

Motive a su equipo con el nuevo elemento de auxiliar de su KaVo ESTETICA E70/E80 Vision de diseño moderno y elegante. Intuitivo e interactivo en el manejo. Equipado con una pantalla táctil sensible y la nueva y sencilla superficie de uso. Análogo al elemento de odontólogo. Todas las funciones centrales de sillón y de higiene, así como funciones de lámparas de tratamiento están a disposición rápida y directa.

Perfección para las necesidades individuales.

Ahora esto ya es algo personal. El elemento del auxiliar ofrece muchas posibilidades de manejo, adaptables de manera individual. Es fácilmente configurable y adaptable a las necesidades de su asistente. Desde un dispositivo de polimerización hasta un salvador adicional.

Es una cuestión de ajuste.

De esa manera el trabajo será mucho más sencillo. Para una secuencia de movimiento libre y rápida se pueden ajustar los instrumentos exactamente según las costumbres y preferencias individuales. El soporte para instrumentos garantiza una higiene aun mayor. Para ello sirve el ajuste flexible de altura así como el movimiento abatible - el elemento del auxiliar es completamente ergonómico.



Levedad en perfección - exclusivamente para el sistema KaVo ESTETICA® E80 Vision.

Unos procesos de trabajo óptimos hasta en el mínimo detalle.

Disfrute de un nuevo concepto de trabajo. Descubra un máximo en confort de tratamiento para Usted y sus pacientes. Aproveche las excelentes características especialmente diseñadas para KaVo ESTETICA E80 Vision. ¡Se quedará fascinado!

Sólido y preciso.

Posicione su elemento de odontólogo exactamente en el lugar que desea tenerlo. Con el freno neumático de serie puede desplazar y posicionar el elemento de odontólogo de su KaVo ESTETICA E80 Vision de una manera aun más precisa y estable. Así tendrá siempre todo a la disposición - y por lo tanto también bajo control.

Todo exactamente en el lugar donde tiene que estar.


No importa si el paciente es grande o pequeño, el desplazamiento horizontal garantiza que su campo de trabajo - la boca del paciente - siempre esté en el mismo lugar. De esa manera, el trayecto de sus manos siempre es el mismo. También, si desplaza el sillón del paciente al cambiar entre tratamiento de maxilar superior e inferior.

La mejor posición para cada paciente.

Adáptese perfectamente a cada paciente. Con la elevación motriz del banco de asiento, los pacientes con lordosis o con espalda curva estarán cómodos y también los niños estarán en una posición ergonómicamente correcta. Incluso durante tratamientos de larga duración, la elevación del banco de asiento ofrece mayor confort, debido a que durante el tratamiento podrá cambiar la posición del paciente.



Este confort que ofrece la elevación del banco de asiento para Usted y sus pacientes sólo la disfrutará con KaVo.

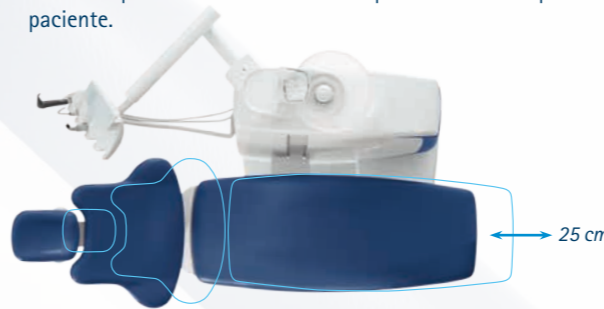

Aproveche el espacio libre alcanzado por el desplazamiento horizontal según lo considere necesario.

La taza de la escupidera con el giro automático.

Algo muy cómodo. La taza de la escupidera gira automáticamente hacia el paciente - y de regreso, al ocupar su posición original para el tratamiento.

Abierto para el futuro - gracias a interfaces USB integrados.

Conecte fácilmente aparatos adicionales a su KaVo ESTETICA E80 Vision, usando los interfaces USB. Eso funciona de una manera muy sencilla, debido a que su sistema de tratamiento reconoce automáticamente lo que conectó.

¡NUEVO! Motor quirúrgico S600 LED - Tan potente puede ser algo tan ligero.

¡Trabaje con un campeón mundial! El nuevo motor quirúrgico S600 LED de KaVo es uno de los motores quirúrgicos más ligeros y pequeños del mundo. 28 % más ligero y 20 % más corto que su antecesor.

Con el KaVo S600 LED, uno de los más ligeros y pequeños micromotores del mundo, podrá realizar las secuencias quirúrgicas diarias con más tranquilidad.

Cirugía completa con bomba de solución salina integrada.

Con la bomba de solución salina integrada directamente en el elemento de odontólogo y el soporte para la solución salina, Usted disfruta del máximo confort y de la ayuda más efectiva para cualquier tratamiento quirúrgico. No puede haber nada mejor.



Comunicación óptima con el paciente. Está en sus manos.

Aproveche el poder de las imágenes.

Explique a su paciente con todo lujo de detalles las medidas necesarias del tratamiento. Aproveche para su comunicación con el paciente las tomas y las imágenes de alta resolución en una presentación brillante. Especialmente para ello se desarrolló el sistema de comunicación con pacientes CONEXIO con de KaVo.

KaVo ERGOcam One – Una cámara pequeña con un enorme efecto.

Explique a sus pacientes la situación odontológica, usando imágenes con una alta nitidez y con un brillo excelente. Las imágenes son tan nítidas que no necesitan retoque. La cámara KaVo ERGOcam One de fácil manejo le ofrece siempre la toma perfecta. Esto no sólo es cómodo sino que también ahorra un tiempo valioso. Es posible activar la foto con la mano o con el réostato de pie.

KaVo DIAGNOcam – Imágenes de diagnóstico sin rayos X.

Realice una imagen real de diagnóstico. O un video. Como Usted prefiera. En el elemento de odontólogo o con el réostato de pie. Con la KaVo DIAGNOcam podrá detectar a tiempo lesiones de caries. Longitudes de ondas las reemplazan a los rayos X nocivos. Descubra con mayor facilidad las caries y obtenga una sonrisa de sus pacientes.

Microscopio dental Leica M320 – nítido hasta en el detalle más pequeño.

Con el microscopio M320 de Leica, especialmente desarrollado para la ortodoncia descubrirá una nueva dimensión. Debido a la combinación de la tecnología de imágenes Full-HD y una iluminación LED moderna se pueden generar imágenes nítidas y claras. Con el objetivo MultiFoc y una distancia focal de 200 hasta 300 mm se puede cambiar entre diferentes niveles de ampliación y por lo tanto siempre estará correctamente enfocado.

Las imágenes del microscopio se generan en la pantalla KaVo y se pueden almacenar, pulsando un botón, cómodamente, en CONEXIO.

Con el microscopio dental Leica M320 ampliará su visión.

Muéstreles todo a sus pacientes.

Impresione a sus pacientes con imágenes nítidas. Las nuevas pantallas KaVo Screen One y KaVo Screen HD ofrecen una alta calidad de imagen, unos valores de contraste convincentes y unos colores brillantes. Óptimamente ajustadas para todos los tipos de aparatos de impresión de imágenes como cámaras o microscopios. Debido a la pantalla táctil en el elemento de odontólogo, las pantallas son fáciles de controlar. Para su máxima seguridad de higiene, las dos pantallas cuentan con vidrios protectores, ranuras reducidas y es posible ajustarlas con una sola mano.

KaVo Screen One – el ingreso al mundo HD

- HD-True-Flatscreen
- Relación de imagen: 16:9
- Diagonal de pantalla: 19 pulgadas
- Dos entradas digitales para microscopio y para PC

KaVo Screen HD – la selección perfecta en Full HD

- Full-HD-True-Flatscreen
- Relación de imagen: 16:9
- Diagonal de pantalla: 22 pulgadas
- Dos entradas digitales para microscopio y para PC



CONEXIO conecta, lo que está relacionado.

No importa lo que tenga planeado, CONEXIO le facilita el camino.

Disfrute de una mayor eficacia en el trabajo diario de su consulta. Precisamente para eso está CONEXIO. Acceda mediante la pantalla táctil de la unidad de tratamiento directamente a todos los datos de sus pacientes. ¿Añadir otros archivos? No hay problema. Todos los datos registrados se asignan directamente al archivo del paciente. CONEXIO simplifica las secuencias de trabajo. Déjese dirigir de una manera lógica y altamente eficiente a través de todos los procesos de trabajo. Ahorre tiempo. De fácil manejo. Sencillo. No existe una libertad mayor que ésta.



Muy útil para sus diagnósticos. Muy educativo para sus pacientes.

Aproveche la práctica opción de captura de pantalla CONEXIO para recortar una imagen de una cierta zona y para almacenarla como imagen individual. Sea del vídeo o de una imagen completa - para recorte, contraste, brillo, ampliación o almacenamiento a partir de ahora no necesitará de otros programas o de ordenadores alternativos.

Tenga siempre una visión clara - con el historial automático.

Cada diagnóstico es protocolado, resumido y almacenado por el sistema. Completamente automático. Utilice un filtro de búsqueda para poder encontrar rápidamente ciertas informaciones en el historial.

Un concepto de tratamiento con pies y cabeza.

De esa manera el trabajo se convierte en placer. Todo está precisamente allí donde lo quiere tener y donde lo necesita, disponible directamente en su elemento de odontólogo. La superficie ergonómica de mando en la pantalla táctil de la unidad de tratamiento lo permite y garantiza el pleno acceso al archivo del paciente. Y si no tiene una mano libre: todas las funciones centrales de CONEXIO se pueden controlar y activar mediante el reóstato de pie. Cómodo e higiénico.

Actual en todo momento.

¿Quiere conectar un nuevo aparato de tratamiento a su KaVo ESTETICA E70/E80 Vision? Nada más sencillo que esto. CONEXIO reconoce componentes de hardware KaVo de manera inmediata y automática. Esto significa: función plug and play en cada ampliación de sistema.

Actualizaciones de software y de firmware se reconocen de manera automática, preparándolas para la instalación. De esta manera, su sistema siempre estará actualizado y la seguridad de su base de datos asegurada.

Swap Tray – su plataforma de intercambio protegida.

Con Swap Tray se pueden reunir datos digitales, tomas de rayos X o vídeos y compartirlos con otros usuarios de CONEXIO. Para ello se pueden incluso intercambiar las tomas en el formato estándar y, en caso necesario, también de manera anonimizada. Es muy sencillo y sin tener que cargar la cuenta de email.

Apueste por lo seguro - con un back-up de datos automático

Lo seguro puede ser tan sencillo. Sobre todo cuando no es necesario pensar en guardar copias de seguridad. Usted determina cuando - y enseguida el sistema CONEXIO genera copias de seguridad de sus datos de manera periódica. De esa manera tendrá más tiempo para lo esencial.



Fascinante en forma y color.

Nuestra propuesta para crear espacios agradables.

Observe el sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision desde una perspectiva completamente diferente. Desde afuera. Observe las formas y los colores. Aquí se aprecia estilo y clase. Por lo tanto no es casualidad que el equipo KaVo ESTETICA E80, desarrollado por SLOGDESIGN haya sido galardonado con el premio "Good Design Award". Elegancia. Superficies de alta calidad. Modelo ergonómico. Y por la amplia gama de colores de laca y del acolchado se puede imprimir un sello individualizado. Toda su presentación genera confianza y transmite seguridad. Una visión, con la que todos se sentirán bien. Usted, su equipo y sus pacientes.


Colores de pintura metalizados



Colores de pintura uni



Colores de acolchado

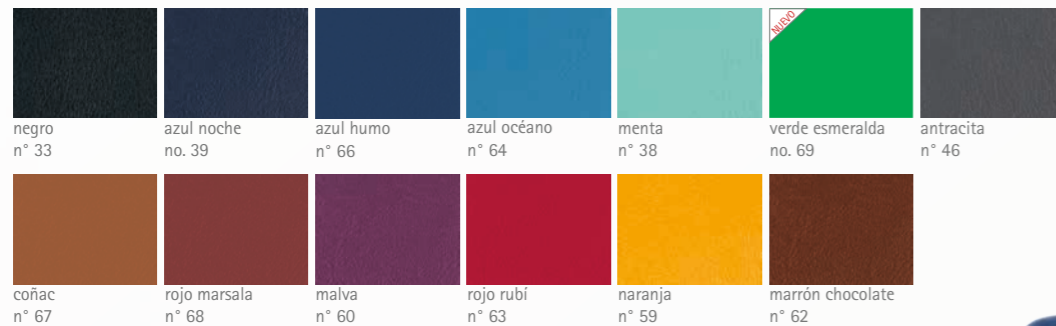

Respaldo comfort: máxima comodidad y ancho apoyo para los hombros del paciente.

Aquí sus pacientes siempre estarán cómodos.

Cada paciente es distinto en cuanto a figura, peso y tamaño. Este equipo lo ha tenido en cuenta.

Sus pacientes se sentirán especialmente cómodos con el respaldo ancho Comfort. Gracias a un ajuste de la longitud básica, la unidad KaVo ESTETICA E70/E80 Vision se adapta a cada tamaño y constitución corporal. El respaldo Progress es especialmente delgado y ofrece un excelente acceso al paciente. Con el reposacabezas, sus pacientes estarán en una posición cómoda, incluso durante tratamientos de mayor duración. Ergonomía al más alto nivel. También en cuanto a comodidad.

Respaldo Progress: postura de trabajo adecuada y óptimo acceso para el odontólogo, especialmente en el tratamiento de niños.

Máximo confort comenzando por la cabeza.

Disfrute Usted y sus pacientes de la máxima comodidad. Ajuste el reposacabezas KaVo ESTETICA E70/E80 Vision exactamente según la posición de cabeza y boca. Las posiciones de fijación están perfectamente adaptadas a la anatomía. Ya sea de manera manual, neumática o mecánica, siempre encontrará la óptima posición del reposacabezas. Confortable y preciso.

Para el reposacabezas de 2 articulación hay un modelo neumático, motriz y mecánico.



Cuando inteligencia práctica se convierte en una higiene segura.

Listo para funcionar. Con seguridad.

No permita que el tema de la higiene le robe tiempo en su trabajo diario. Las funciones integradas de higiene y los procesos automatizados de su KaVo ESTETICA E70/E80 Vision se encargan de ello. De forma altamente eficiente y ejemplar. Mediante la pantalla táctil Usted recibirá las indicaciones del manejo de las funciones de higiene. Y Usted dispondrá de un ahorro efectivo de tiempo.

Automatizado, integrado.

Apueste por algo nuevo. La limpieza y desinfección automática, sencilla y fiable de las mangueras de aspiración e instrumentos. El centro de higiene se encuentra integrado en el cuerpo del equipo KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Aquí se pueden conectar tanto mangueras de limpieza como también mangueras de instrumentos. Sin mayores problemas. El centro de higiene es desmontable y termodesinfectable.

Agradable. Con piezas extraíbles.

Típico. KaVo también ha pensado en soluciones para aquellos procesos en los que las manos tienen un papel importante. Retire fácilmente las piezas contaminadas como mangos, soportes de instrumentos o la taza la escupidera. Siempre que sea necesario, se pueden limpiar, desinfectar o esterilizar.



Los mangos, las esterillas de silicona, la taza de la escupidera, el soporte para instrumentos y los brazos basculantes se pueden desmontar y desinfectar con facilidad.

Mayor protección gracias al stop de retrosucción.

Proteja su sistema de suministro de agua. Con el stop de retrosucción en instrumentos y motores KaVo evitará que se aspire agua contaminada en la unidad de tratamiento.

Programas de enjuague automáticos.

Las funciones automáticas de enjuague de todos los conductos por los que circule el agua le facilitan considerablemente esta tarea. Cuatro programas le garantizan una higiene fiable.

La desgerminación continua automatizada con OXYGENAL 6 evita que se multipliquen microorganismos en el sistema. Una perfecta calidad de los líquidos de refrigeración y de enjuague aseguran una desgerminación intensiva (programa de limpieza "Semanal") también en caso de períodos prologandos de inactividad.

HYDRClean limpia y desinfecta completamente el sistema de aspiración y desagüe así como las mangueras. Adicionalmente, se dosifica automáticamente el gel DEKASEPTOL, de manera que su asistente no necesitará realizar estas tareas de forma manual.



DEKAmat y OXYmat - integrados en el cuerpo del equipo - ofrecen una higiene estandarizada y automatizada. Además, el cuidado automatizado garantiza un valor añadido en cuanto a seguridad de funcionamiento.



Eficacia es cuestión de disponer de un equipamiento adecuado.

Estar preparado para el mañana.

Trabaje en el futuro. ¡Hoy! Porque con la amplias posibilidades que le ofrece el sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision estará perfectamente equipado, tanto en el presente como en el futuro.

Máxima satisfacción.

En cuanto a los instrumentos, permítase disfrutar de lo mejor. La nueva serie de KaVo MASTERmatic abarca toda la gama de aplicaciones y Usted trabajará siempre con la máxima calidad y precisión. Disfrute de una mejor visión y de un óptimo acceso. Para ello disponer de un contra ángulo M25L con la cabeza reducida es de gran ventaja.

Sea flexible en cuanto al futuro.

Con las interfaces USB integradas en el sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision, su unidad de tratamiento siempre podrá ampliarse con otros componentes. De esa manera también tendrá más libertad a la hora de adquirir dispositivos adicionales.

Disponga de la mejor luz en su consulta.

De un ejemplo luminoso. Confíe en la lámpara LED KaVoLUX 540 de 5 estrellas. Una luz blanca natural de la más alta calidad. Se puede conectar, desconectar y manejar sin necesidad de tener contacto con ella. Incluso en el modo COMPOsave. Carcasa cerrada, superficies lisas y asas desmontables garantizan adicionalmente una higiene rápida y fiable.

El balance perfecto de fuerza y rendimiento.

PiezoLED, para una limpieza dental en profundidad.

Con el PiezoLED-Scaler de ultrasonido, la limpieza dental profesional no sólo será altamente precisa sino que también ahorrará un tiempo valioso. Las puntas de titanio garantizan vibraciones lineales controladas para un tratamiento efectivo. Tanto el diente como la encía permanecen intactos gracias a la exactitud en el trabajo incluso en aquellas zonas especialmente delicadas.

Emisiones circulares de luz ofrecen una visión óptima y, junto con un diseño ligero y ergonómico, podrá realizar el tratamiento siempre bajo condiciones óptimas.


Micromotor INTRA LUX KL 703 LED – tan grande puede ser algo tan pequeño.

Descubra lo que un motor pequeño puede rendir. Fuerza sin fin. Trabajar sin fatiga. Una gama de revoluciones de 100 hasta 40.000 min⁻¹ con multiplicación sencilla. Ligero. Compacto. Agradable en la mano. Optimizado para el SMARTdrive, con este micromotor trabajará de forma muy precisa y eficiente en cada situación de tratamiento.

Convéngase de su suavidad de marcha que permite trabajar de una manera más precisa, confortable y sencilla.

Pleno torque: SMARTdrive.

¡Fuerza interior! Confíe en una manera de trabajo precisa y eficiente. Con el sistema de control de motor SMARTDrive. Desarrolla su torque en el campo bajo de revoluciones de 100 min⁻¹. Ya no será necesario reemplazar frecuentemente el contra-ángulo para la eliminación de caries y para el pulido. Podrá realizar el tratamiento sólo con un contra-ángulo y no perderá un tiempo valioso. En cada campo de revoluciones, Usted será el primero. Sólo tiene que pisar el acelerador.

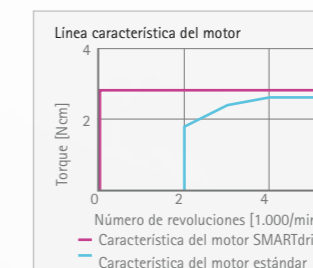

Aproveche el alto torque y el arranque de pocas vibraciones de su KaVo SMARTdrive con un amplio campo de revoluciones de 100 hasta 40.000 rpm.



PiezoLED: la tecnología innovadora de ultrasonidos para un máximo estándar en el tratamiento de pacientes.

Opciones de equipamientos.

	E80 Vision			E70 Vision				E80 Vision			E70 Vision		
	T	C		T	S	C		T	C		T	S	C
Sillón del paciente							Elemento auxiliar						
Acolchado blando	●	●		●	●	●	Pantalla táctil de vidrio	●	●		●	●	●
Desplazamiento horizontal motorizado	●	●		-	-	-	Aspiración de neblina de spray	●	●		●	●	●
Elevación automat. del banco de asiento	●	●		-	-	-	Extractor de saliva	●	●		●	●	●
Respaldo							2.º extractor de saliva	○	○		○	○	○
Comfort	x	x		x	x	x	Pieza de mano de tres funciones	○	○		○	○	○
Progress	x	x		x	x	x	Pieza manual de polimerización Satelec Mini LED	○	○		○	○	○
Reposacabezas							Soporte de bandeja para alojamiento de bandejas	○	○		○	○	○
neumático de 2 articulaciones	-	-		●	●	●	Brazo de altura regulable	●	●		●	●	●
neumático de 2 articulaciones SOMATIC E, motorizado	○	○		○	○	○	Soporte desmontable para instrumentos	●	●		●	●	●
Reposacabezas de confort	○	○		○	○	○	Cuerpo del aparato						
Apoyabrazos							Taza de escupidera de cristal	x	x		x	x	x
Izquierdo	○	○		○	○	○	Taza de escupidera de porcelana	x	x		x	x	x
Izquierda y derecha	○	○		○	○	○	Taza de la escupidera abatible con accionamiento	●	●		○	○	○
Elemento del odontólogo							Centro de higiene	●	●		●	●	●
Pantalla táctil	●	●		●	●	●	Desgerminación continua	●	●		●	●	●
1.ª manguera de turbina	●	●		●	●	●	Kit de desgerminación intensiva	●	●		●	●	●
2.-5. Manguera de turbinas	○	○		○	○	○	HYDROclean (sistema de purga)	●	●		●	●	●
1.º motor KL 703	●	●		●	●	●	DEKAmat y OXYmat	●	●		●	●	●
2.-5. Motor KL 703	○	○		○	○	○	Calentador de agua	●	●		●	●	●
Función endo	○	○		○	○	○	VACUstopp	●	●		●	●	●
COMFORTbase	○	○		○	○	○	Reóstato de pie inalámbrico	○	○		○	○	○
Pieza de mano de tres funciones	-	-		●	●	●	Sistema de alimentación						
Pieza de mano multifuncional	●	●		○	○	○	Bloque de agua DVGW	●	●		●	●	●
PiezoLED Scaler con ultrasonido	○	○		○	○	○	Conexión de aparatos adicionales	○	○		○	○	○
Solución salina fisiológica	○	○		○	○	○	AQUAmat	●	●		●	●	●
Motor quirúrgico S600 LED	○	○		-	-	-	CENTRAmat	○	○		○	○	○
Calentamiento spray instrumentos	●	●		●	●	●	Sistema de eliminación						
Stop de retrosucción para instrumentos	●	●		●	●	●	Aspiración externa	●	●		●	●	●
Soporte desmontable para instrumentos	●	●		●	●	●	Separador de amalgama DÜRR	○	○		○	○	○
Negatoscopio pequeño	○	○		○	○	○	Separador automático DÜRR	○	○		○	○	○
Negatoscopio grande	○	○		○	○	○	Lámpara de tratamiento						
Puerto USB	●	●		○	○	○	KaVoLUX 540 LED	○	○		○	○	○
Freno neumático para el sistema del brazo	●	●		○	○	○	Barra de montaje para lámparas	○	○		○	○	○
Alojamiento para dos bandejas normalizadas	●	●		●	●	●	Comunicación con los pacientes						
Mesita de servicio ajustable para dos bandejas normalizadas	●	-		●	-	-	KaVo Screen One	○	○		○	○	○
Mesa de servicio 1658	-	●		-	-	●	KaVo Screen HD	○	○		○	○	○
							CONEXIO	○	○		○	○	○
							Cámara intraoral KaVo ERGOcam One	○	○		○	○	○
							KaVo DIAGNOcam U	○	○		○	○	○

● Equipamiento en serie ○ Equipamiento opcional x Debe ser seleccionado - No está disponible



KaVo. Dental Excellence.