

PGA
Ácido Poliglicólico absorbible

doble aguja 3/8 círculo **espatulada**

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xCTSS	6,2/150	10 cm	violeta	10/0	0,2	38915
2xCTSS	6,2/150	10 cm	violeta	9/0	0,3	38916
2xCTS	6/220	30 cm	violeta	8/0	0,4	38909
2xCTS	6/220	45 cm	violeta	7/0	0,5	38904

• Oftalmología

doble aguja 1/4 círculo **espatulada**

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xCTS	8/250	45 cm	violeta	6/0	0,7	38903
2xCTS	8/360	45 cm	violeta	5/0	1	38914

• Oftalmología

doble aguja 1/2 círculo **espatulada**

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xCTS	8/220	30 cm	violeta	8/0	0,4	38910
2xCTS	8/230	45 cm	violeta	7/0	0,5	38911
2xCTS	8/300	45 cm	violeta	6/0	0,7	38908

• Oftalmología


PGA **absorción 90 días**


características técnicas

Estructura	Multifilamento trenzado recubierto.
Composición	Ácido poliglicólico recubierto de estearato cálcico, éster de ácido graso de sacarosa y policaprolactona.
Color	Violeta - Incoloro
Esterilización	Óxido de Etileno
Fuerza tensil	Mantenimiento de la fuerza tensil 28/30 días.
Absorción	60 a 90 días
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistencia durante el periodo crítico de cicatrización. • Paso suave a través de los tejidos. • Superficie uniforme y atraumática. • Seguridad absoluta en el anudado. • Excelente manejabilidad y cómoda manipulación.
Indicaciones	Cierre general, subcutáneo, cirugía digestiva, traumatología, ginecología, urología, oftalmología y ligaduras.
Presentación	Cajas de 12 unidades


LOT nº lote

REF referencia de catálogo


 un solo uso

 caducidad **yyyy-mm** (año-mes)


STERILE EO esterilizado por óxido de etileno

 ver instrucciones

CE Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

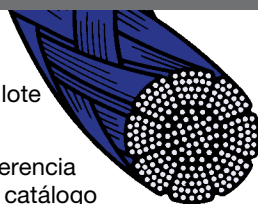

ácido poliglicólico

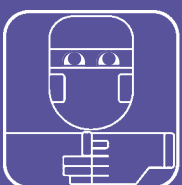

Laboratorio Aragón, S.A.

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
España
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
infogeneral@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

suturas Aragón

PGA

absorción
90 días

