


**3M**

**Filtek™**

Supreme  
Fluído

Dando-lhe a vantagem **com o  
nosso novo design de seringa**

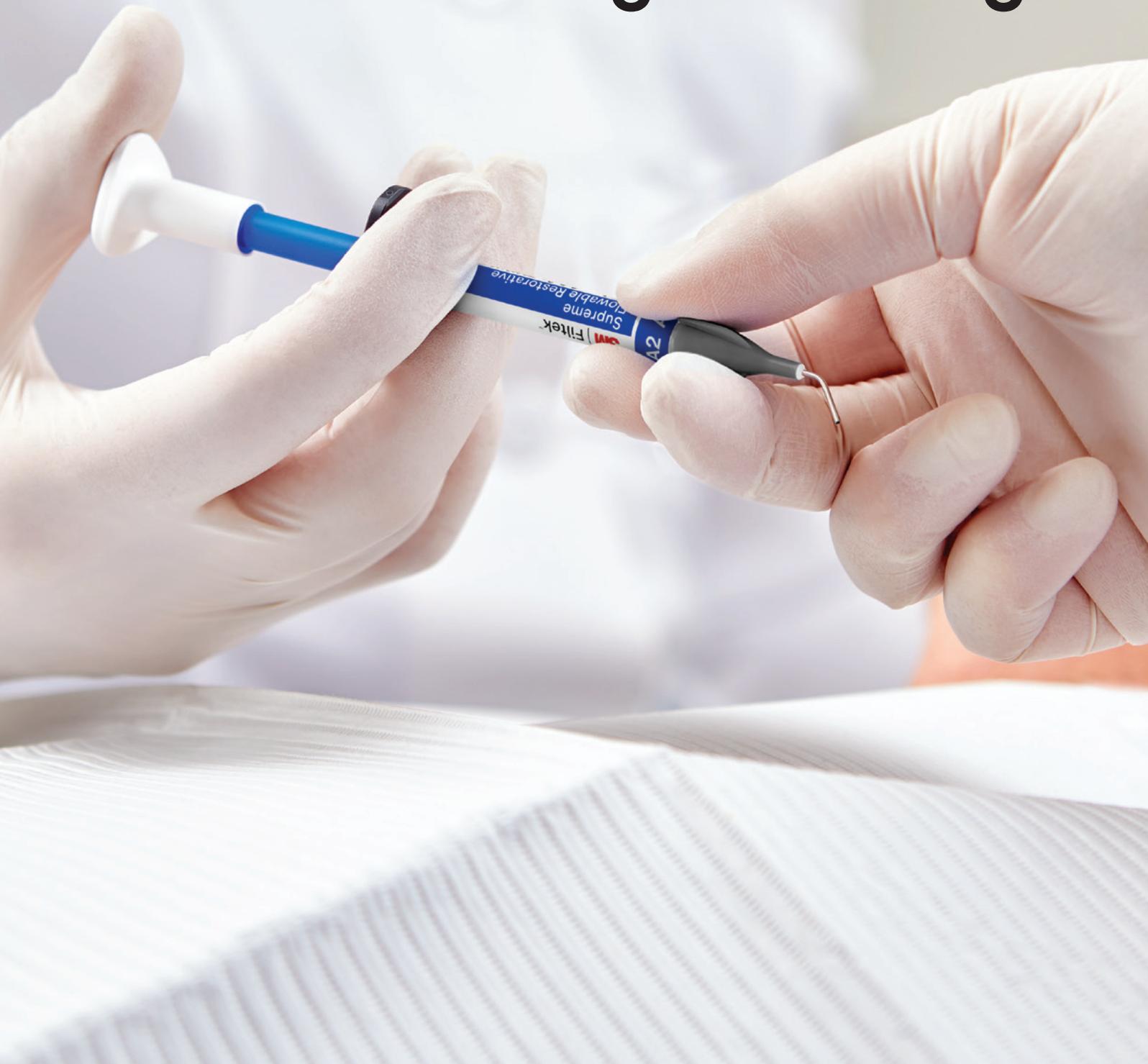

# Agora o nosso mais popular fluído é mais fácil de aplicar

O compósito fluído 3M™ Filtek™ Supreme está disponível numa nova seringa ergonómica. Concebida para melhorar o conforto e a moldagem por injeção, denominamos este nosso novo produto 3M™ Filtek™ Supreme Fluído.

## Reduz as bolhas e o desperdício

Praticamente nenhuma bolha ou material "run-on" durante a distribuição dá-lhe um melhor controlo.

## Fácil de segurar e injetar

A placa triangular e o êmbolo tornam mais rápida e fácil a aderência ao dedo.

## Adeus à incerteza

O corpo da seringa azul indica o volume restante do material. Quando a sua seringa está vazia, só aparece o êmbolo branco.

## Cânula dobrável

Fácil de dobrar para um melhor acesso.

## Excelente adaptação


Excelente adaptação, retenção de polimento e resistência ao desgaste.

## Versátil

Uma vasta gama de indicações e técnicas.



O popular fluído da 3M é feito com a nanotecnologia **AUTÊNTICA**. Esta tecnologia patenteada torna as nanopartículas mais uniformes em tamanho, resultando numa excelente resistência ao desgaste e retenção polida.

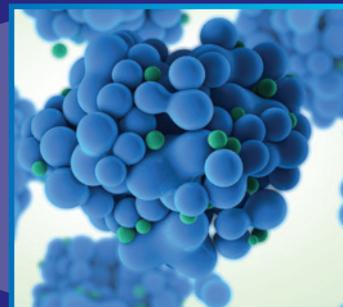


# Aqueça com confiança

## Porquê aquecer os compósitos 3M?

- Os compósitos aquecidos são mais fluídos, para um manuseamento mais fácil
- O aquecimento pode melhorar a adaptação do compósito 3M à estrutura dentária<sup>1</sup>
- O aquecimento diminui a força de extrusão<sup>2</sup>

158°F\*

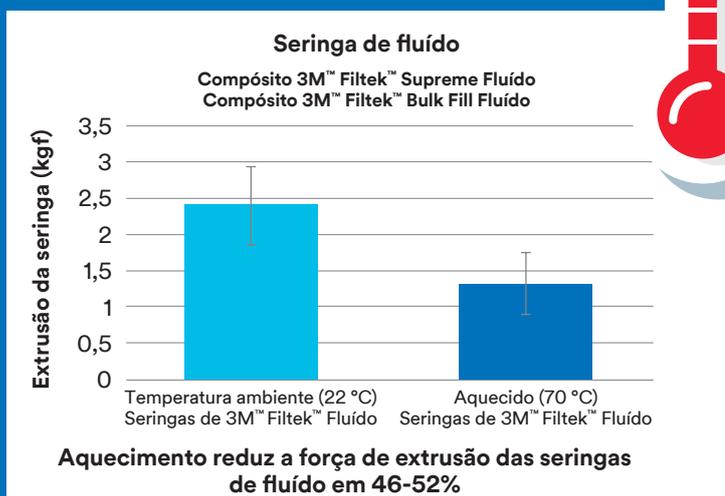

## Maior rendimento com total tranquilidade

Propriedades Físicas Inalteradas:<sup>3</sup>

- Resistência à tração diametral
- Módulo de elasticidade
- Resistência à flexão
- Estabilidade da cor
- Profundidade de polimerização



## Dicas para o sucesso

Pode aquecer com segurança os compósitos Filtek, em apenas 5 minutos. Siga estas indicações gerais, e consulte o Manual de Instruções para mais informações.

## COMO DEVE FAZER

**AQUEÇA** as seringas de fluído até 70 °C durante um máximo de 1 hora, até 25 vezes.

**UTILIZE** apenas aparelhos de aquecimento de compósitos disponíveis comercialmente.

**CONSULTE** o Manual de Instruções para mais informações.

## O QUE DEVE EVITAR

**NÃO** utilize o calor de uma lâmpada, micro-ondas, aquecedor de canecas ou outros dispositivos de aquecimento não aprovados. Consulte o Manual de Instruções para mais informações.

\* Temperatura de aquecimento recomendada

1 Com base num estudo in vitro patrocinado pela 3M. 11 dentistas colocaram 88 restaurações MOD Classe II. Os dentes foram microscopicamente comparados em termos de falhas, defeitos. Comparações feitas entre as técnicas e os operadores.

2 Dados internos da 3M

3 Quando aquecido de acordo com nosso IFU (até 70 °C durante um máximo de 1 hora).

# Uma paleta de tonalidades a condizer

As tonalidades do compósito 3M™ Filtek™ Supreme Fluído são formuladas para serem idênticas às da Filtek™ Universal Restorative e Restauração Universal 3M™ Filtek™ Supreme. (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2)



A2

3M™ Filtek™  
Supreme Fluído



A2

3M™ Filtek™  
Universal Restorative



A2B

3M™ Filtek™ Supreme  
Universal Restorative



## Casos clínicos

O compósito 3M™ Filtek™ Supreme Fluido oferece uma transição suave do material para o dente para restaurações estéticas.



Antes de



Colocação do fluido



Depois de

Fotos gentilmente cedidas pelo Dr. Gunnar Reich, Munique, Alemanha

O compósito Filtek Supreme Fluido adapta-se facilmente e sela as margens.



Antes de



Colocação do fluido



Depois de

Fotos gentilmente cedidas pelo Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Itália

## Indicações

(graduais até 2 mm)



Classe III



Classe V



Odontologia  
minimamente  
invasiva (OMI)<sup>1</sup>



Base em  
rest. direta



Liner



Reparação de rest.  
indiretas (pequenos  
defeitos)



Reparações<sup>2</sup>



Bloqueador  
de undercut



Selante de  
fossas e  
fissuras

Consulte as instruções de utilização para saber a lista completa de indicações.

1. Incluindo pequenas restaurações oclusais que não suportam tensão.
2. Reparação de resina acrílica temporária e compôsta.

## Como realizar um pedido



### Recargas 3M™ Filtek™ Supreme Fluido

As recargas das seringas incluem:  
2 seringas de 2 g; 20 pontas de distribuição.

TONALIDADE	REF. 3M
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
Branco	6032W
Branco Extra	6032XW
OA3	6032AO3

REF. 3M	INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
3700T	Pontas de aplicação do 3M™ Filtek™ Supreme Fluido, cinzento (20)



3M Oral Care  
3M España, S.L. Sucursal em Portugal  
Edifício Office Oriente,  
Rua do Mar da China, n.º 3 Piso 3A  
1990-138 Lisboa  
www.3M.com.pt

3M e Filtek são marcas comerciais da 3M ou 3M Deutschland GmbH. Usado sob licença no Canadá. Bioclear é uma marca registrada da Bioclear Matrix. Por favor, recicle. Impresso na Espanha. © 3M 2020. Todos os direitos reservados. 70-2013-7229-2